


SCHERMO di HESS-LANCASTER

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN

GUIDA OPERATIVA

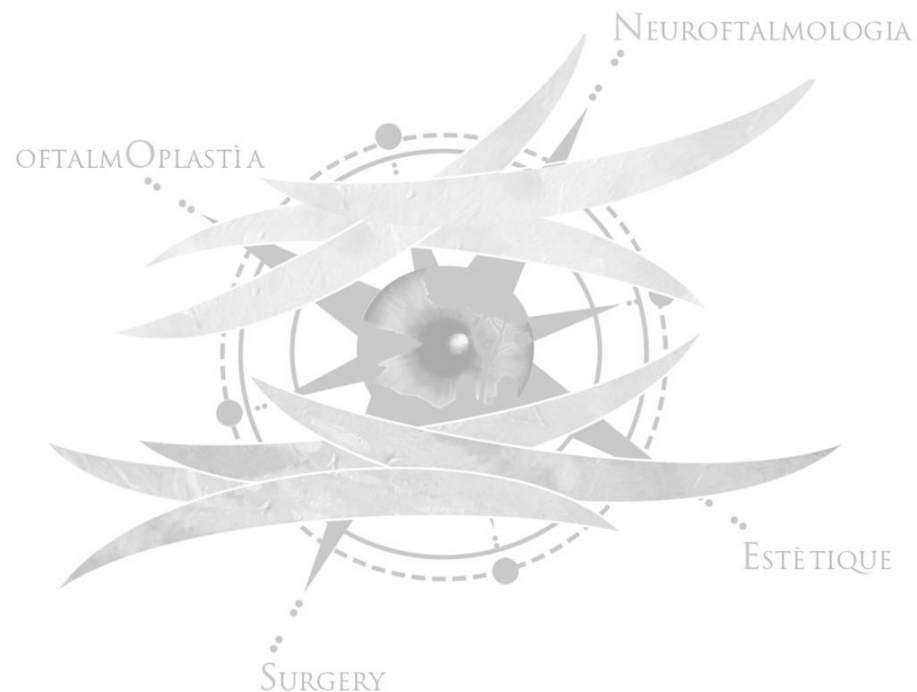

PREREQUISITI TECNICI

Prima di iniziare,
verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1 - Il visore Quest e il dispositivo utilizzato per accedere alla WebApp devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

2 - È necessario disporre di un browser web aggiornato per poter accedere a:

<https://okulo.virtualfactory.it> (TEST eseguiti Salerno)

<https://okulo2.virtualfactory.it> (TEST eseguiti a Chieti)

Pazienti Visite Documenti

Gestione Pazienti
Inserisci, modifica ed elimina i pazienti

Nuovo Paziente

Nome *

Cognome *

Età

Sesso *

Data di Nascita

Codice Fiscale

Patologie

Nessuna patologia inserita

+ Aggiungi Patologia

Aggiungi

Elenco Pazienti 3 / 3

Cerca per firstName, lastName o codice fiscale...

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	COD. FISCALE	AZIONI
FRANCESCO	ROSSI	25/01/1979		<div>Modifica</div> <div>Visite</div> <div>Documenti</div>

1
COMPILARE
DATI
PAZIENTE

1 - Compilazione della sezione «PAZIENTI»

Compilare tutti i campi richiesti inserendo i dati necessari.
Verificare attentamente la correttezza delle informazioni inserite.

Una volta completata la compilazione, procedere secondo le indicazioni presenti nell'interfaccia. È, quindi, possibile accedere:

- alla **MODIFICA** dei dati inseriti
- alla sezione «**VISITE**»
- alla sezione «**DOCUMENTI**»

2 - Compilazione della sezione «VISITE»

Selezionare il paziente tra quelli precedentemente inseriti e compilare tutti i campi richiesti.

Per poter effettuare il test, occorre che la visita sia «PROGRAMMATA».

In questa schermata c'è la possibilità di **annullare un test già effettuato**.

In caso di annullamento, è **fondamentale specificarne sempre la motivazione** in quanto ci consente di:

- comprendere eventuali problematiche;
- analizzarne le cause;
- migliorarne qualità e l'affidabilità

In questa sezione è, inoltre, possibile accedere:

- alla **MODIFICA** dei dati inseriti inerenti la visita
- alla sezione «**IMMAGINI**» per poter visualizzare il test effettuato

2

COMPILARE VISITA PAZIENTE

Programmata

Annullata

Gestione Visite

Nuova Visita

Paziente *

Seleziona...

Data *

gg/mm/aaaa

status

Programmata

reason *

Note

Aggiungi

Elenco Visite

2 / 2

Cerca per reason, note o data...

PAZIENTE	DATA	MOTIVO	STATO	AZIONI
FRANCESCO ROSSI	26/01/2026	PRIMA VISITA	Comp.	<div>Immagini</div> <div>Modifica</div>
FRANCESCO ROSSI	30/01/2026	CONTROLLO	Comp.	<div>Immagini</div> <div>Modifica</div>

VIRTUAL FACTORY S.r.l.


Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN



3

ESEGUITE
IL
TEST

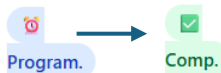

Elenco Visite 2 / 2

🔍 Cerca per reason, note o data...

PAZIENTE	DATA	MOTIVO	STATO	AZIONI
FRANCESCO ROSSI	26/01/2026	PRIMA VISITA	Program.	Immagini Modifica
FRANCESCO ROSSI	30/01/2026	CONTROLLO	Comp.	Immagini Modifica

3 – Avvio del test mediante il Quest

Per poter effettuare il test, occorre che la visita sia «PROGRAMMATA».

A questo punto, il paziente indosserà il visore e seguirà de istruzioni guidate.

Alla fine del test, la visita risulterà «COMPLETATA».

Si ricorda la possibilità di annullare il test se non ultimato.



3

ESEGUITE
IL TEST
(avvio)



3.2

VIRTUAL FACTORY
SOLUZIONI DIGITALI

3.1

PREMERE IL
TASTO HOME






3 – Avvio del test mediante il Quest

E' preferibile che il visore sia già stato preventivamente avviato e che il paziente si limiti al solo test.



SELEZIONARE QUANTO INDICATO PER AVVIARE

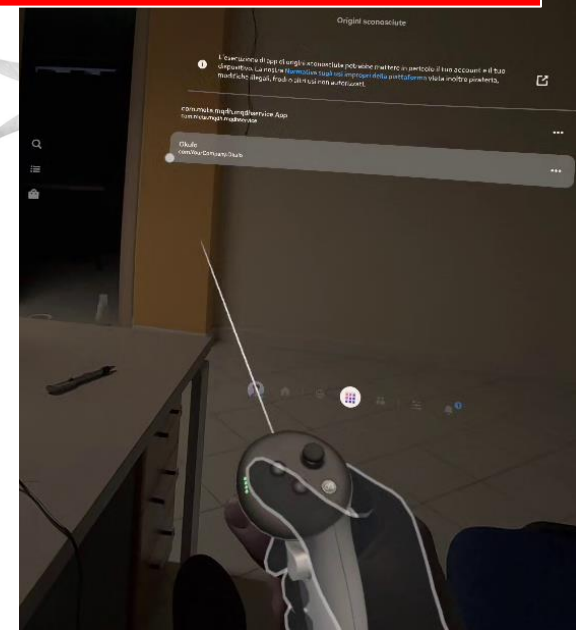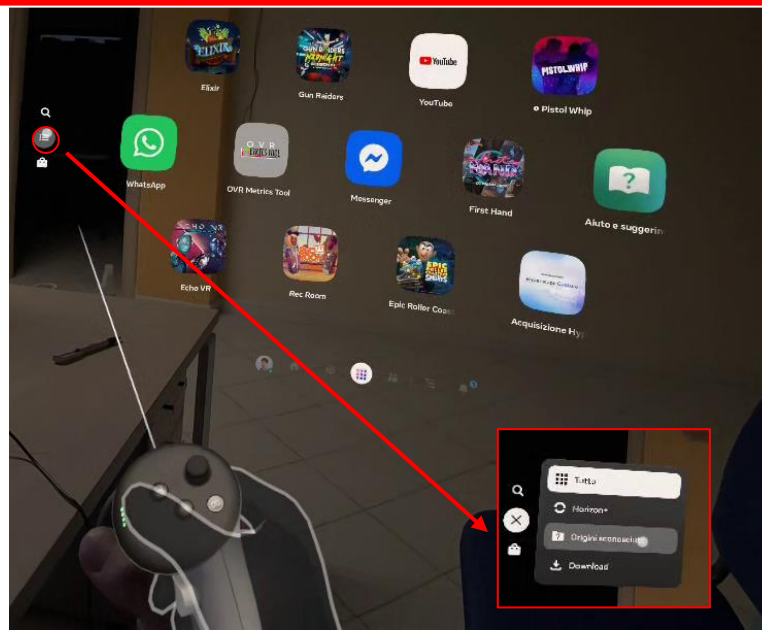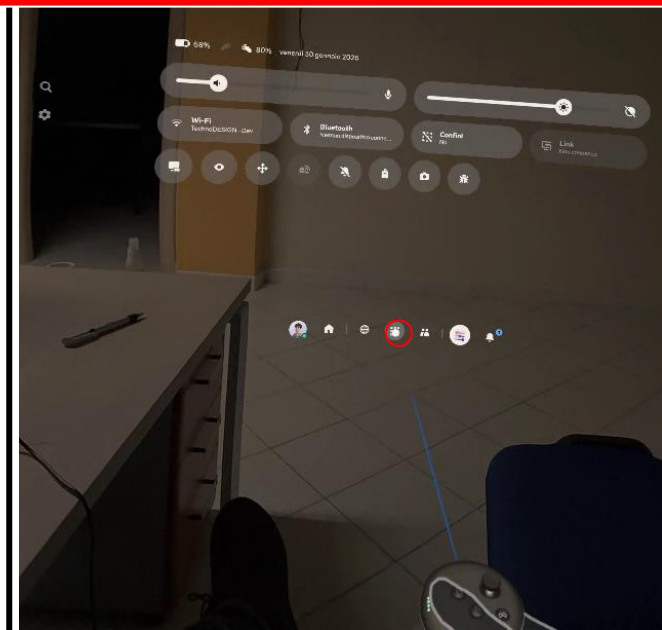

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it


Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN



3



**ESEGUITE
IL TEST
(esecuzione)**

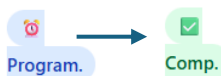


3.3

ESECUZIONE



3 – Avvio del test mediante il Quest

Il paziente dovrà solo **AVVIARE** l'applicazione ed eseguire il test seguendo le istruzioni.

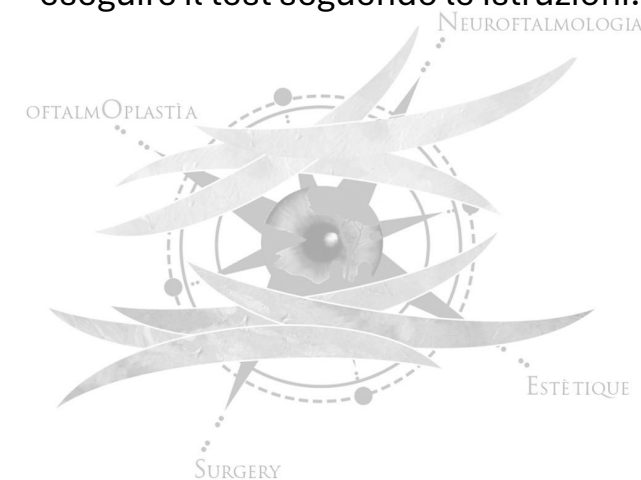

FRANCESCO
ROSSI

26/01/2026

PRIMA VISITA

Comp.




Immagini
Modifica

4




**VISUALIZZARE ED
ESPORTARE TEST**

Coppie Immagini Visita
PRIMA VISITA - 26/01/2026


1 Completo
3 coppie

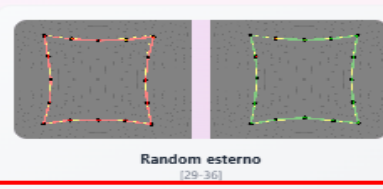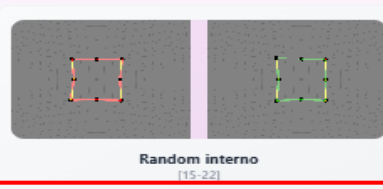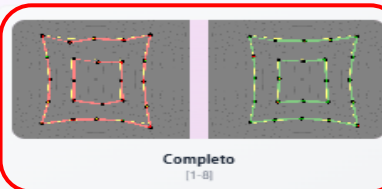

2 Paresi Retto inferiore Dx
3 coppie

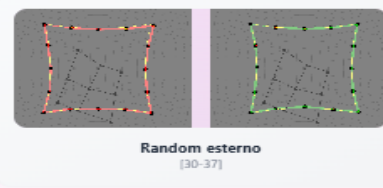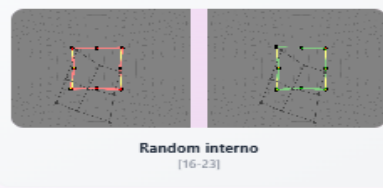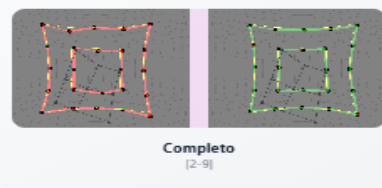

6 Paresi Obq. inferiore Dx
3 coppie


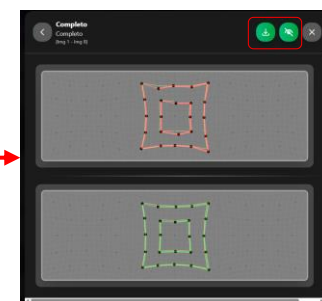


4 -Esportazione test

E' possibile esportare
nella cartella
download il pdf del
test effettuato sia **con**
che senza dati
sensibili



SCHERMO DI HESS

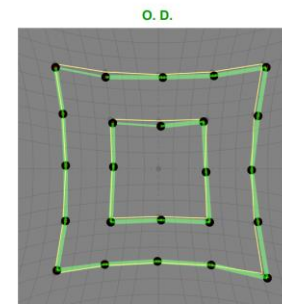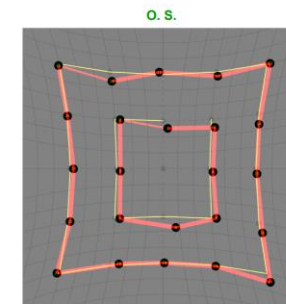



Verde davanti all'O. S.
Paziente: **FRANCESCO ROSSI**
Sesso: **M**
Età: **47**
Data Visita: **26/01/2026**
Motivazione: **PRIMA VISITA**

Verde davanti all'O. D.
Patologie: **Iperensione,Diabete tipo 2**
Note: **Nessuna nota**

Generato: 30/01/2026, 16:30:35



SCHERMO DI HESS

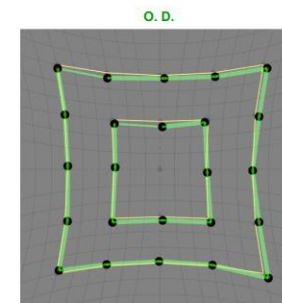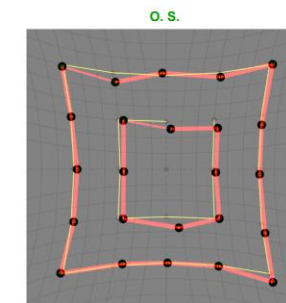

Verde davanti all'O. S.
Paziente: **697C7D66D1F30E81693C**
Sesso: **M**
Età: **47**
Data Visita: **26/01/2026**
Motivazione: **PRIMA VISITA**

Verde davanti all'O. D.
Patologie: **Iperensione,Diabete tipo 2**
Note: **Nessuna nota**

Generato: 30/01/2026, 16:30:40

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN

Pazienti

Visite

Documenti



5 - Sezione «DOCUMENTI»

Utilizzare la sezione «documenti» per importare ed esportare eventuali documenti significativi

5

IMPORTATE
ED
ESPORTARE
DOCUMENTI

Gestione Documenti

Nuovo Documento

Paziente *
#697C7D66D1F30E81693C - FI

File *
[Scegli il file](#) Nessu... scelto


Descrizione *
Es. Referto cardiologico, analisi del sangue...

[Carica Documento](#)

Documenti

Cerca documenti...


PAZIENTE	DESCRIZIONE	STATO	AZIONI
FRANCESCO ROSSI	PATOLOGIE DOC_PATOLOGIE.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Scarica Elimina
FRANCESCO ROSSI	RICOVERI DOC_RICOVERI.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Scarica Elimina
FRANCESCO ROSSI	260126_SHERMO_DI_HESS scheda_FRANCESCO-ROSSI_26_01_2026_Completo_Completo.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Scarica Elimina
FRANCESCO ROSSI	260130_SCHERMO_DI_HESS scheda_FRANCESCO-ROSSI_30_01_2026_Completo_Completo.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Scarica Elimina

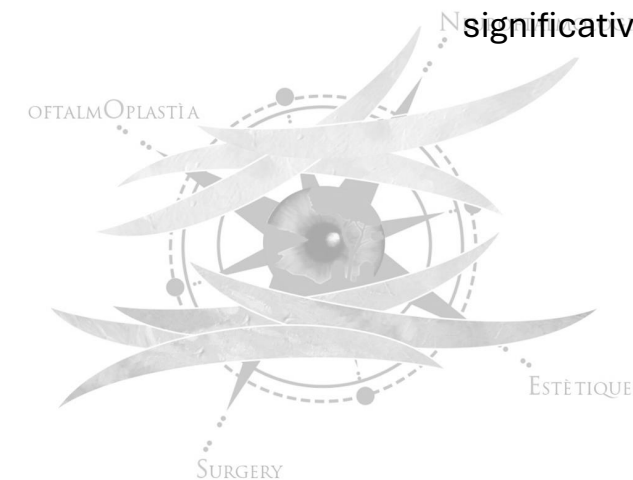

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN

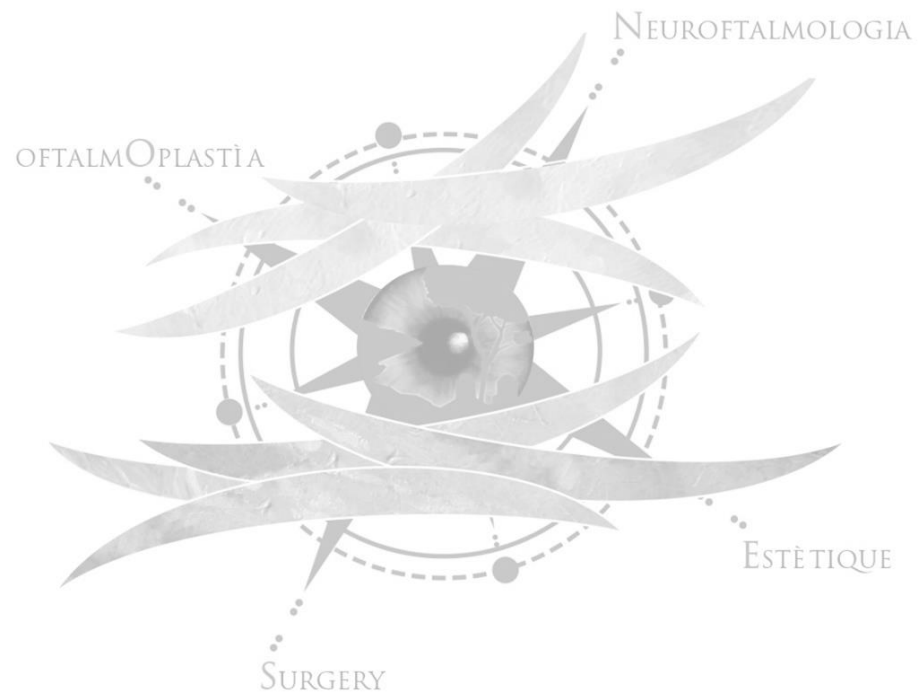

VI CHIEDIAMO
DI COMUNICARE
EVENTUALI SEGNALAZIONI A:

assistenza@virtualfactory.it

e

chirurgiacolangelo@libero.it

SCHERMO di HESS-LANCASTER

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN