


SCHERMO di HESS-LANCASTER

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN

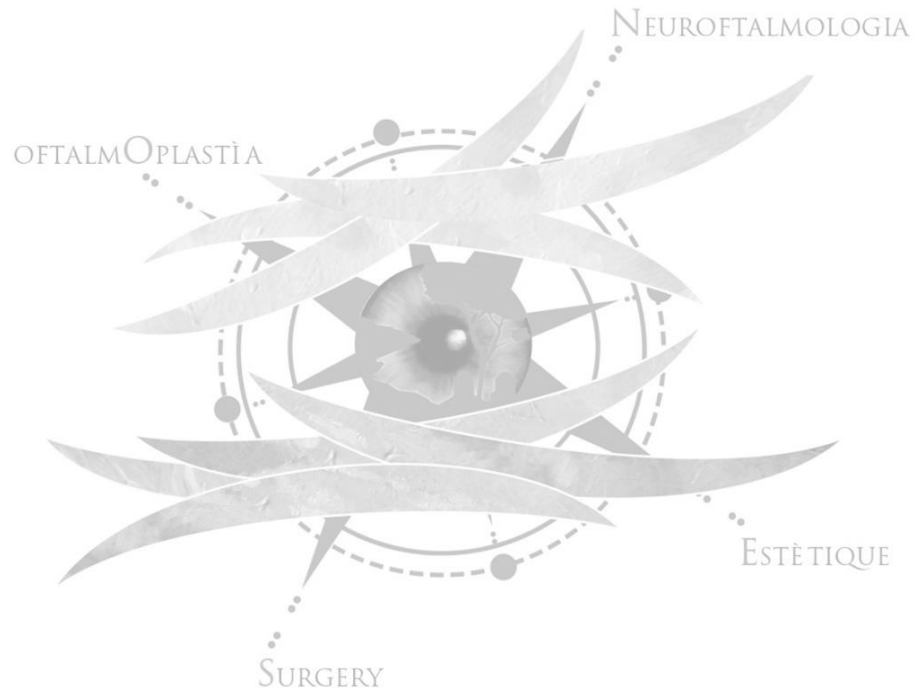

GUIDA OPERATIVA

PREREQUISITI TECNICI

Prima di iniziare,
verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1 - Il visore Quest e il dispositivo utilizzato per accedere alla WebApp devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

2 - È necessario disporre di un browser web aggiornato per poter accedere a:

<https://okulo.virtualfactory.it> (TEST eseguiti a Salerno)
<https://okulo2.virtualfactory.it> (TEST eseguiti a Chieti)



Pazienti

Visite

Documenti

Info



> Gestione Pazienti

Gestendo: MARIA NERI

MARIA NERI

CF:

1

COMPILARE
DATI
PAZIENTE

Nuovo Paziente

Nome *

Cognome *

Età

Sesso * Seleziona...

Data di Nascita

Codice Fiscale

Patologie

Nessuna patologia inserita

+ Aggiungi Patologia

Aggiungi

Elenco Pazienti

3 / 5

Cerca per firstName, lastName o codice fiscale...

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	COD. FISCALE	AZIONI
FRANCESCO	ROSSI	25/01/1979		Modifica Visite Docume
ANGELO	BIANCHI	17/06/1977		Modifica Visite Docume
MARIA	NERI	01/02/1965		Modifica Visite Docume

Visualizzati 1-3 di 5 pazienti

Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

1 - Compilazione della sezione «PAZIENTI»

Compilare tutti i campi richiesti inserendo i dati necessari.
Verificare attentamente la correttezza delle informazioni inserite.

Una volta completata la compilazione, procedere secondo le indicazioni presenti nell'interfaccia. È, quindi, possibile accedere:

- alla **MODIFICA** dei dati inseriti
- alla sezione «**VISITE**»
- alla sezione «**DOCUMENTI**»

2

COMPILARE VISITA PAZIENTE

Gestione Visite
Inserisci, modifica ed elimina le visite

Nuova Visita

Paziente *
Seleziona...

Data *
gg/mm/aaaa

status
Programmata

reason *

Note

Aggiungi

Elenco Visite 3 / 6

Cerca per reason, note o data...

PAZIENTE	DATA	MOTIVO	STATO	AZIONI
FRANCESCO ROSSI	26/01/2026	PRIMA VISITA	Comp.	Immagini Modifica
FRANCESCO ROSSI	30/01/2026	CONTROLLO	Program.	Immagini Modifica
MARIA NERI	30/01/2026	CONTROLLO	Comp.	Immagini Modifica

Visualizzati 1-3 di 6 visite

Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

2 - Compilazione della sezione «VISITE»

Selezionare il paziente tra quelli precedentemente inseriti e compilare tutti i campi richiesti.

per poter effettuare il test, occorre che la visita sia «PROGRAMMATA».

In questa schermata c'è la possibilità di **annullare un test già effettuato**.

In caso di annullamento, è **fondamentale specificarne sempre la motivazione** in quanto ci consente di:

- comprendere eventuali problematiche;
- analizzarne le cause;
- migliorarne qualità e l'affidabilità


In questa sezione è, inoltre, possibile accedere:

- alla **MODIFICA** dei dati inseriti inerenti la visita
- alla sezione «**IMMAGINI**» per poter visualizzare il test effettuato



3

PRIMA DI
ESEGUIRE
IL TEST

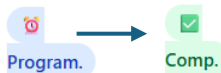

Elenco Visite 3 / 6				
Cerca per reason, note o data...				
PAZIENTE	DATA	MOTIVO	STATO	AZIONI
FRANCESCO ROSSI	26/01/2026	PRIMA VISITA	Comp.	Immagini Modifica
FRANCESCO ROSSI	30/01/2026	CONTROLLO	Program.	Immagini Modifica
MARIA NERI	30/01/2026	CONTROLLO	Comp.	Immagini Modifica

Visualizzati 1-3 di 6 visite

Precedente **Pagina 1 di 2** Successiva

3 – Avvio del test mediante il Quest

Per poter effettuare il test, occorre che la visita sia **«PROGRAMMATA»**.

A questo punto, il paziente indosserà il visore e seguirà le istruzioni guidate.


Alla fine del test, la visita risulterà **«COMPLETATA»**.

Si ricorda la possibilità di annullare il test se non ultimato.



Soprattutto nella fase di sperimentazione, è bene specificare la motivazione per cui il test è stato annullato.

4

COSA C'E'
DA SAPERE

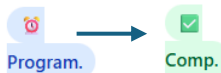

VOLUME

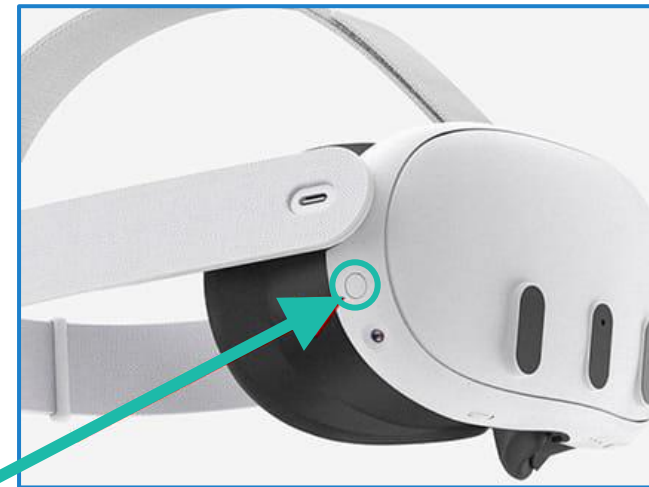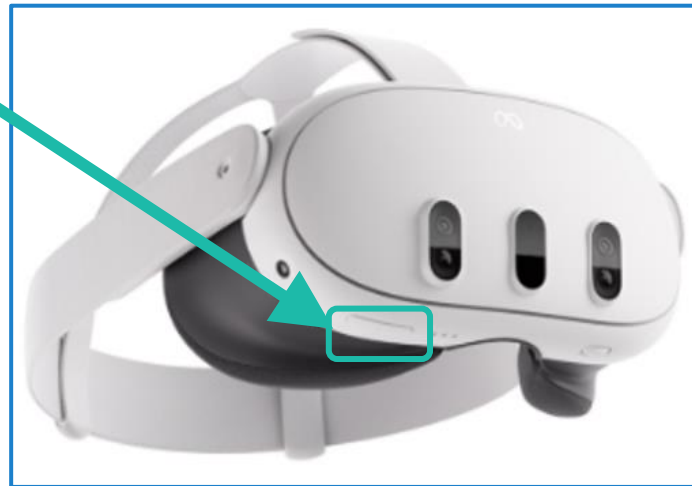

ACCENSIONE

HOME



GRILLETTO



4 – Avvio del test mediante il Quest

La fase di avvio va gestita prima dell'inizio della prima visita.

E' preferibile che il visore sia già stato preventivamente avviato e che il paziente si limiti al solo test.

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it


Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN

ACCENDERE IL
VISORE
ED INDOSSARLO




4.1


AVVIO
APP

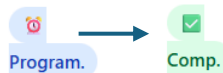


A) Utilizzando il
GRILLETTO, selezionare
«LIBRERIA»

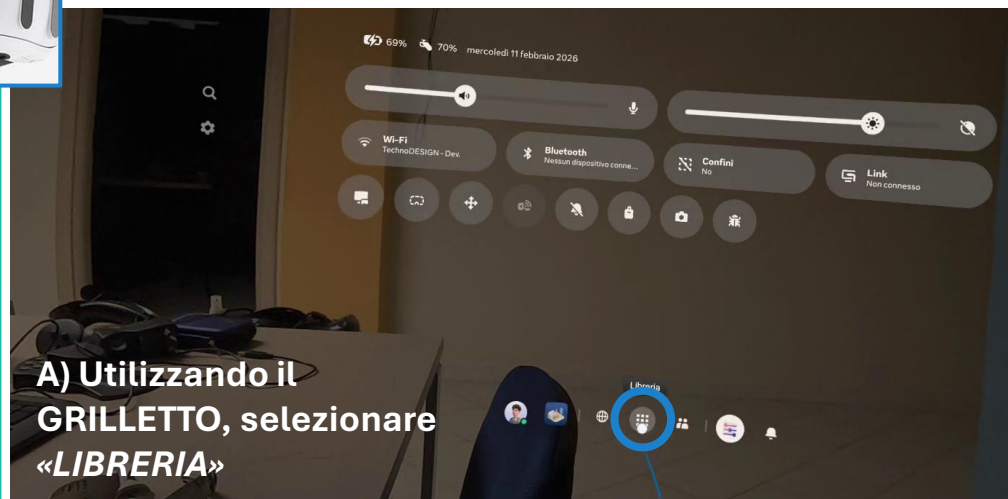


B) Utilizzando il
GRILLETTO,
aprire il «MENU»

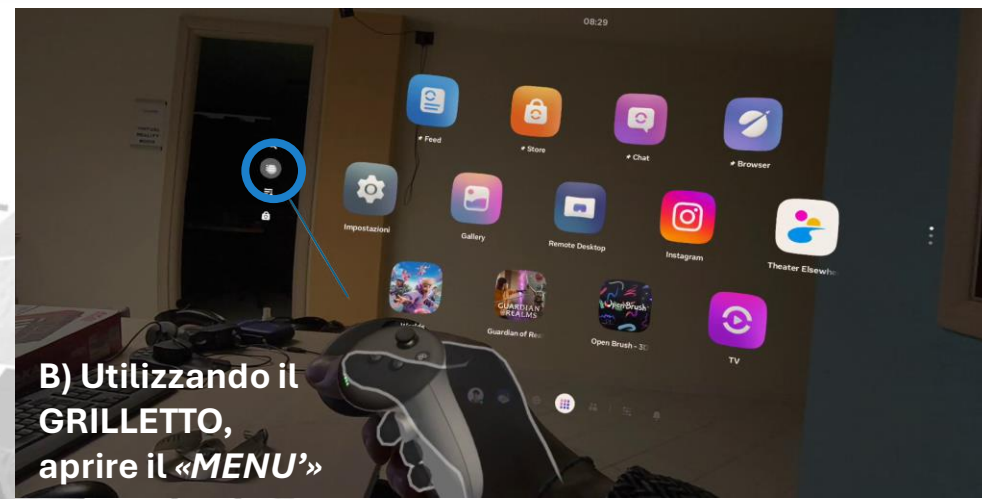

C) Utilizzando il
GRILLETTO,
selezionare
«ORIGINI
SCONOSCIUTE»

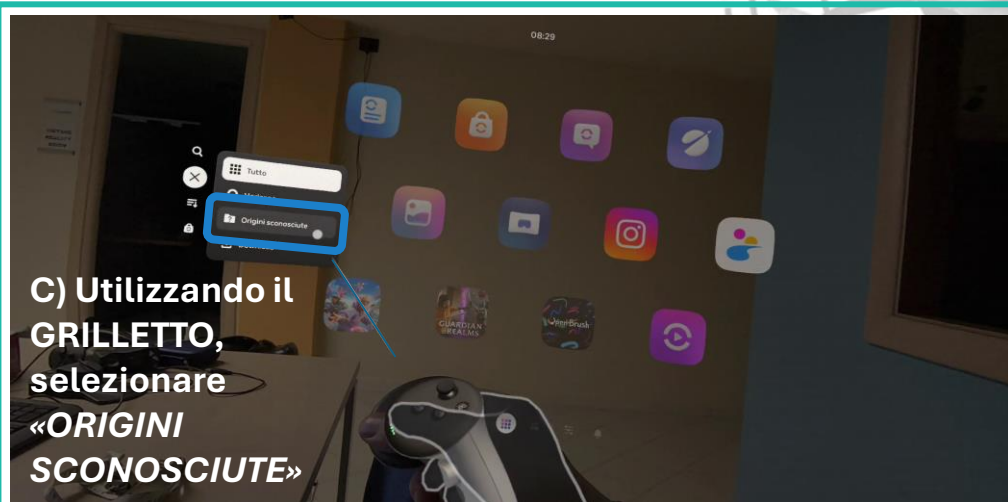

D) Utilizzando il
GRILLETTO,
Selezionare
l'app «OKULO»

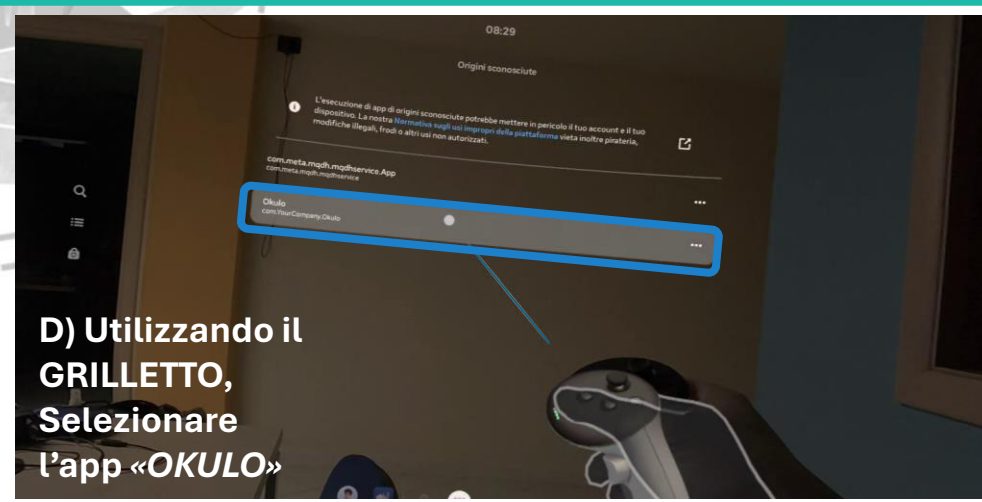




VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN

UTILIZZARE WI-FI

4.2

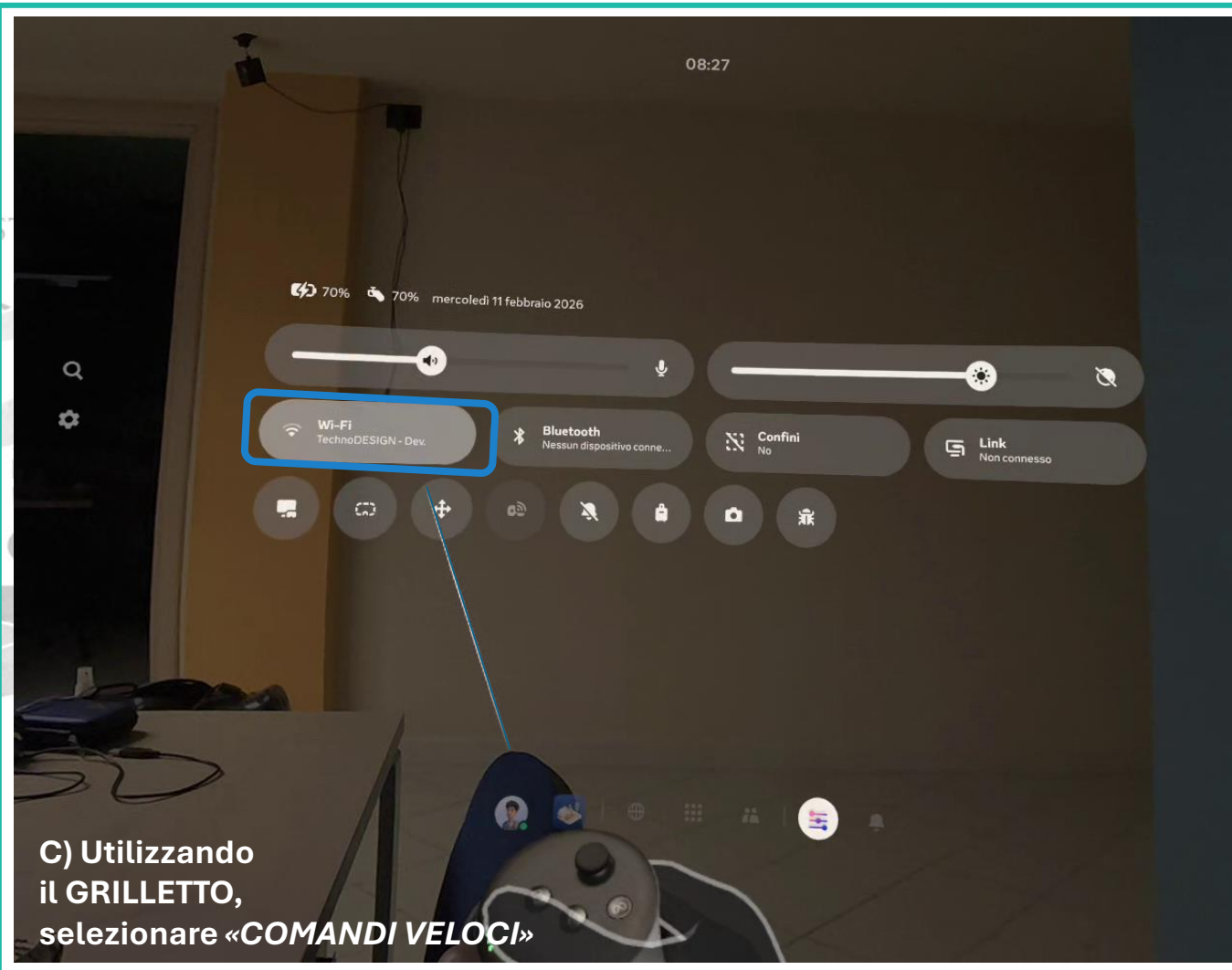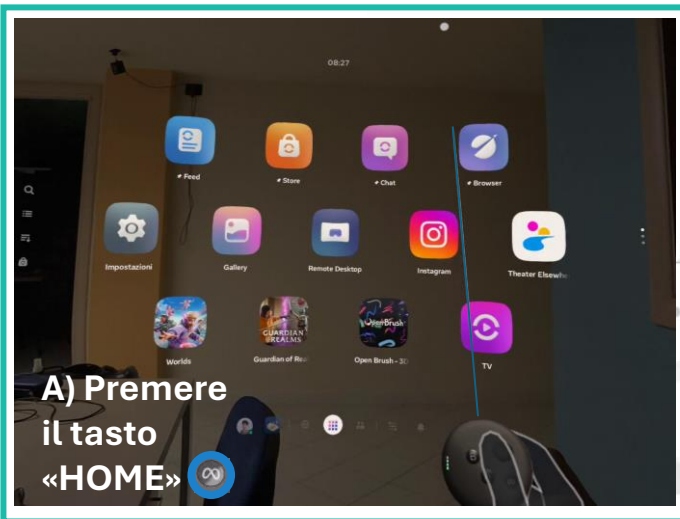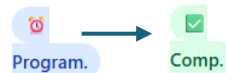

VIRTUAL FACTORY S.r.l.


Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN



5

ESEGUIRE
IL TEST

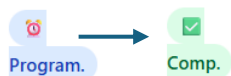


ESECUZIONE



5 – Esecuzione test mediante il Quest

Il paziente dovrà
Solo
eseguire il test seguendo le istruzioni.

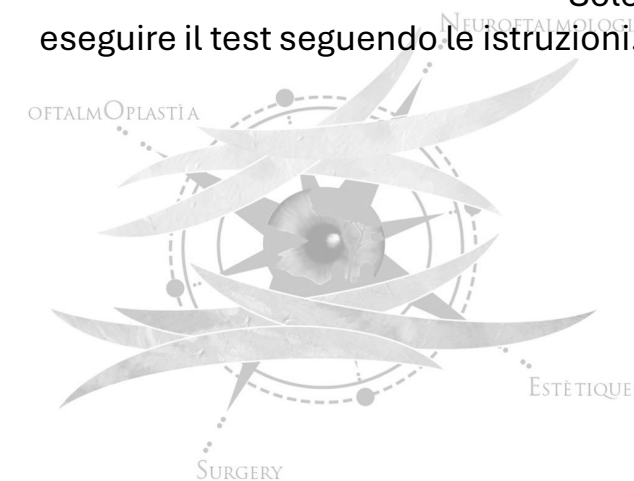

FRANCESCO
ROSSI 26/01/2026 PRIMA VISITA

Comp.




Immagini
Modifica

6




**VISUALIZZARE
ED ESPORTARE
IL TEST**

Coppie Immagini Visita
PRIMA VISITA - 26/01/2026


1 Confronto completo
3 coppie

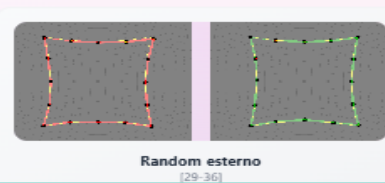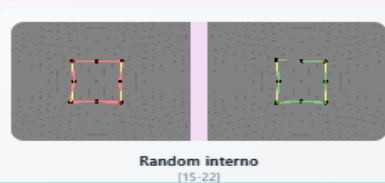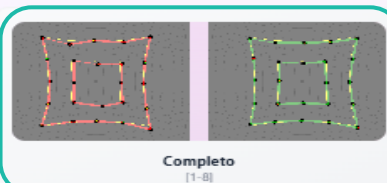

2 Confronto paresi Retto inferiore Dx
3 coppie

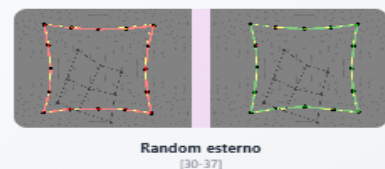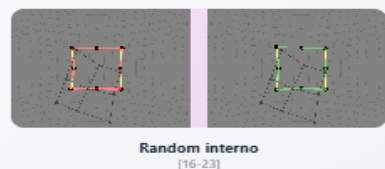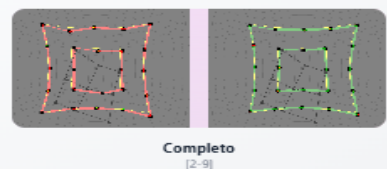



3 Confronto paresi Retto laterale Sx

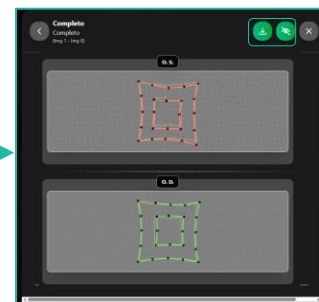

6-Exportazione test

E' possibile esportare
nella cartella
download il pdf del
test effettuato sia **con**
che senza dati
sensibili

SCHERMO DI HESS

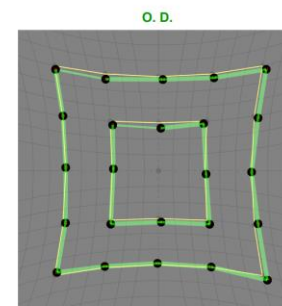
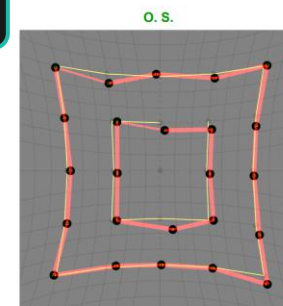


Verde davanti all'O. S.
Paziente: FRANCESCO ROSSI
Sesso: M
Età: 47
Data Visita: 26/01/2026
Motivazione: PRIMA VISITA

Verde davanti all'O. D.
Patologie: Iperensione, Diabete tipo 2
Note: Nessuna nota

Generato: 30/01/2026, 16:30:35

SCHERMO DI HESS

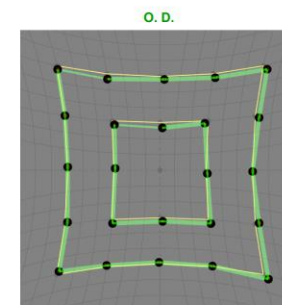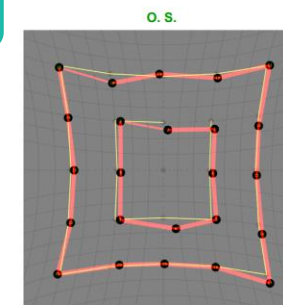

Verde davanti all'O. S.
Paziente: 697C7D66D1F30E81693C
Sesso: M
Età: 47
Data Visita: 26/01/2026
Motivazione: PRIMA VISITA

Verde davanti all'O. D.
Patologie: Iperensione, Diabete tipo 2
Note: Nessuna nota

Generato: 30/01/2026, 16:30:40

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) - Tel. +39 0828 340691 - P. IVA: 05856450654 - www.virtualfactory.it - info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN



Pazienti

Visite

Documenti

Info



7 - Sezione «DOCUMENTI»

Utilizzare la sezione «documenti» per importare ed esportare eventuali documenti significativi

7

IMPORTATE
ED
ESPORTARE
DOCUMENTI

Nuovo Documento

Paziente *

Seleziona... ▼

File *

Scegli il file Nessu... scelto

Descrizione *

Es. Referto cardiologico, analisi del sangue...

Carica Documento

Documenti


3 / 4


Cerca documenti...

PAZIENTE	DESCRIZIONE	STATO	AZIONI
FRANCESCO ROSSI	PATOLOGIE DOC_PATOLOGIE.pdf	✓	Scarica
FRANCESCO ROSSI	RICOVERI DOC_RICOVERI.pdf	✓	Scarica
FRANCESCO ROSSI	260126_SHERMO_DI_HESS scheda_FRANCESCO-ROSSI_26_01_2026_Completo_Completo.pdf	✓	Scarica

Visualizzati 1-3 di 4 documenti

Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

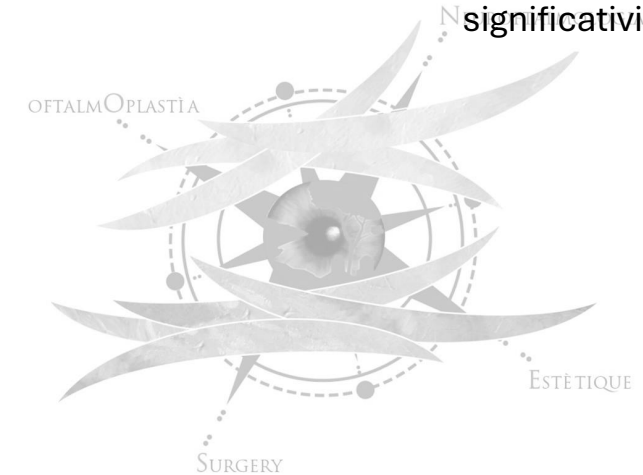

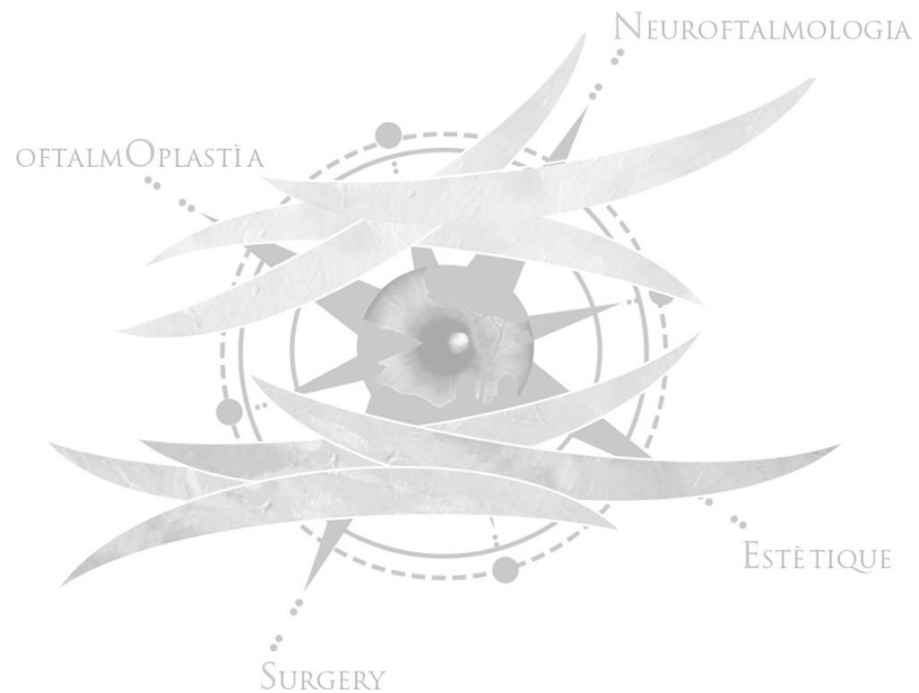

VI CHIEDIAMO
DI COMUNICARE
EVENTUALI SEGNALAZIONI A:

assistenza@virtualfactory.it

e

chirurgiacolangelo@libero.it




SCHERMO di HESS-LANCASTER

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN

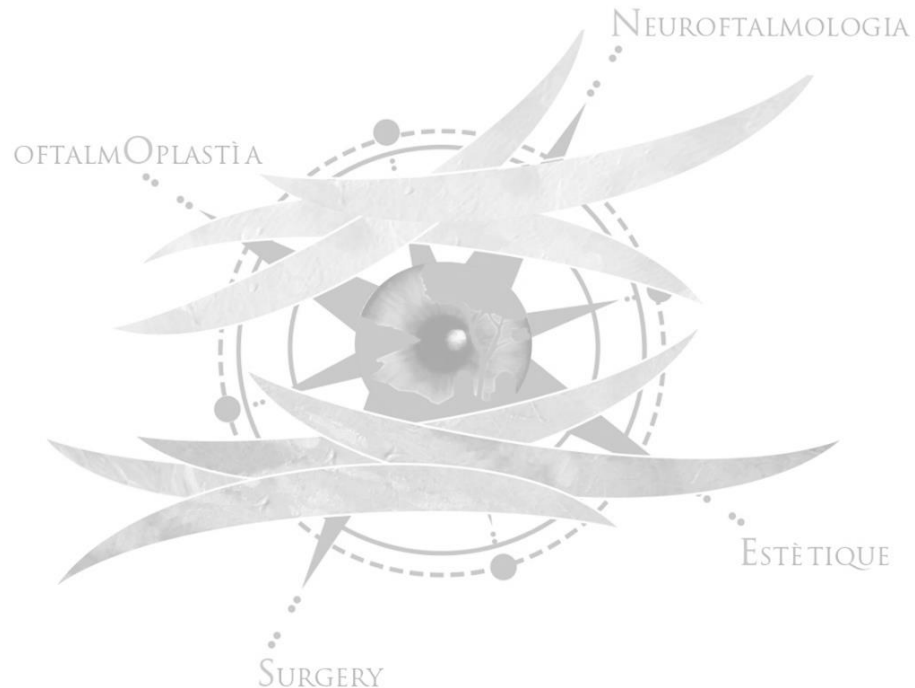





POSSIBILI PROBLEMATICHE E RELATIVE RISOLUZIONI

In caso occorra spostare
il dispositivo,
si dovrà procedere
con la ricalibrazione



POSSIBILI PROBLEMATICHE E RELATIVE RISOLUZIONI

TRACCIARE CONFINI

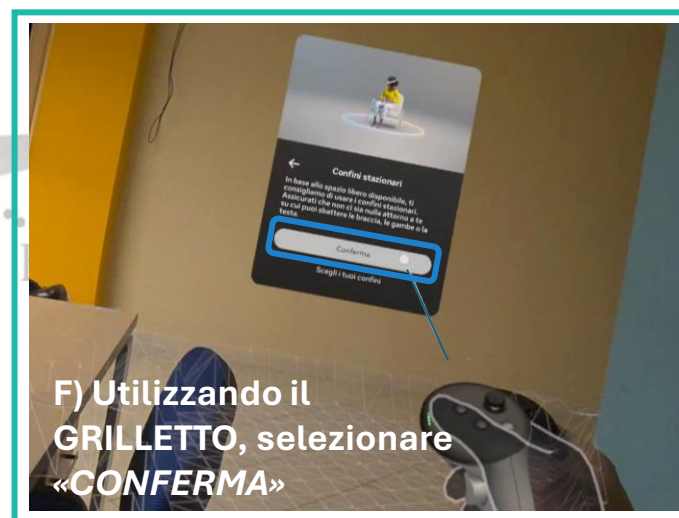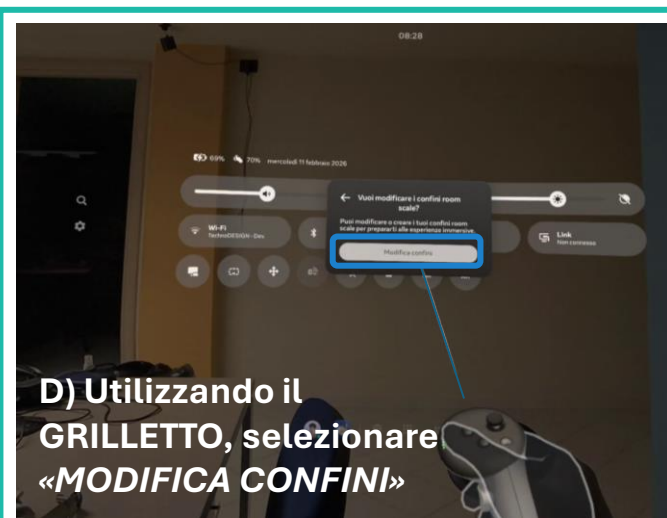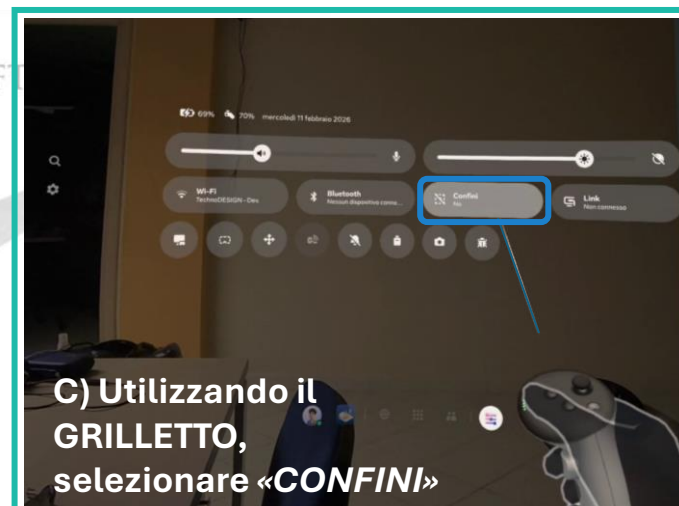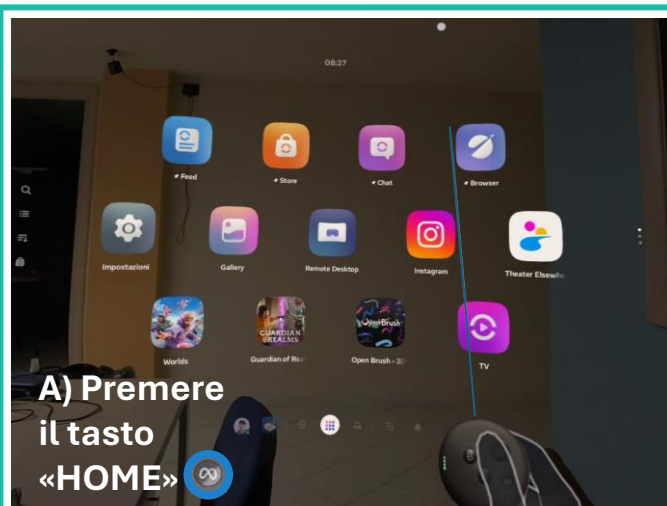



VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) – Tel. +39 0828 340691 – P. IVA: 05856450654 – www.virtualfactory.it – info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN

POSSIBILI PROBLEMATICHE E RELATIVE RISOLUZIONI

RESET CONFINI

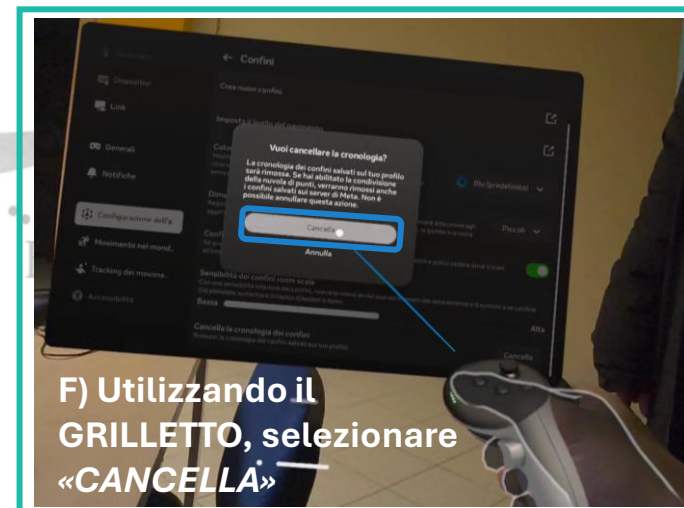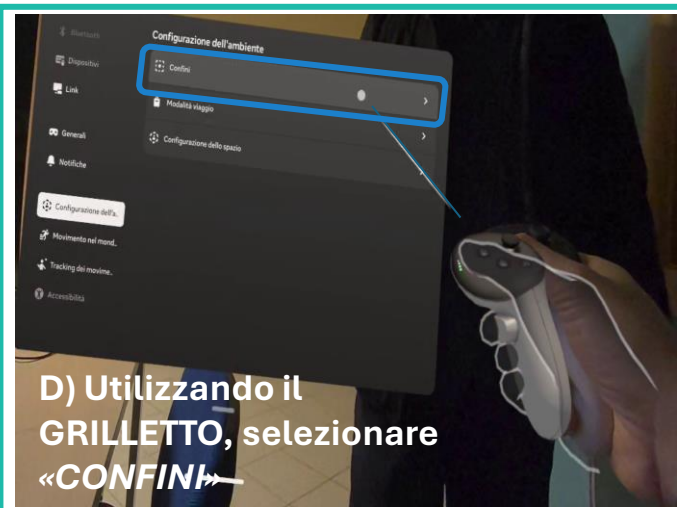

VIRTUAL FACTORY S.r.l.

Sede Legale: Via G. Palatucci, 25 Centro Direzionale Urbe - Sede Operativa: Via R. Jemma, 2 Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) - Tel. +39 0828 340691 - P. IVA: 05856450654 - www.virtualfactory.it - info@virtualfactory.it

Virtual Factory è una società del gruppo Techno DESIGN